

---

# 医療画像情報アプリケーション 簡易マニュアル

---

ShadeQuest/RIS

## 目次

1.	カルテから呼び出し方法	...	2
2.	医療画像情報アプリケーションの操作		
	2.1. メディアの作成方法	...	3
	2.2. 作成履歴の確認	...	4
3.	終了方法	...	5

## 1. カルテから呼び出し方法



(1)メニューのオーダーをクリックします。

(2)[医療画像情報]をクリックして医療画像情報アプリケーションを立ち上げます。

## 2. 医療画像情報アプリケーションの操作

## 2.1. メディア作成の方法

Portable Viewer Creation System

ログイン **テストユーザ1** ユーザ切替

医療画像情報メディア作成

患者ID 0003334489 富士 患者 フジ キンジャ 1972(S47).11.23 48歳 外来 4階中央病棟 6111号室 cm/kg 患者詳細

メディア作成情報

依頼科 検査日 ~ モダリティ 検索 クリア

依頼者

メディア作成日 2021/08/20

メディア作成区分

作成装置

メディア種別 CD

コメント

選択	検査日	モダリティ	AccessionNo	検査種別	画像	備考
<input type="checkbox"/>	2021/02/08	CT	9820200801000000	一般		他院画像
<input type="checkbox"/>	2021/02/08	CT	9820200801000000	一般		

作成履歴

メディア作成 受取票印刷

CD-R画像受取票

区療医連携窓口 印刷 21182

依頼年月日 平成 25 年 12 月 8 日 (金)

依頼ID 45110011 患者

患者氏名 山本 太郎 氏名

依頼元(病院) 院長事務科 依頼者名 橋本 太郎

連絡先部署 内科 内科

印刷 PDS

伝達事項


依頼受付日 平成 年 月 日 ( )

区療医連携窓口担当 受付担当氏名

※上記は受取票印刷により、各センターへ送付される受取票印刷後にCD-R作成が行われます。

## ■ 初期表示について (オレンジ番号)

- (1) システムへのログイン者情報を表示します。
- (2) メディア作成を行う患者情報を表示します。
- (3) メディア作成を行う各種設定情報を表示します。
- (4) 患者に関するすべての画像を一覧で表示します。

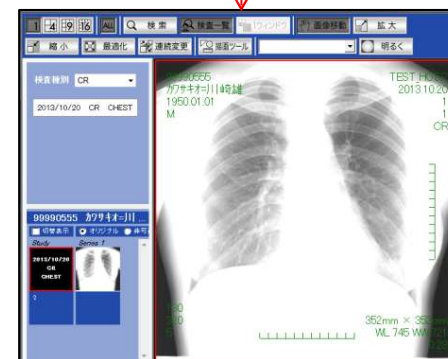

- (1) [任意] メディア作成に関するコメントを入力します。
- (2) [任意] 検査日、又はモダリティを選択します。
- (3) [任意]「検索」ボタンをクリック後、(2)で設定した条件で画像一覧を絞り込みます。
- (4) [任意] 画像アイコンをクリックすることによりViewRが立ち上がり、メディアに書き込む為の画像を確認することができます。
- (5) メディアに書き込む画像を選択します。
- (6) 「メディア作成」ボタンをクリック後、CD-R画像受取票が表示されます。

## 2.2. 作成履歴の確認

(1) 作成履歴

Portable Viewer Creation System

作成履歴 閉じる

患者ID 0003334489 富士 患者 フジ カンジャ 1972(S47).11.23 48歳 外来 4階中央病棟 6111号室 cm/kg 患者詳細

選択	依頼日	依頼科	依頼者	作成区分	装置	進捗
<input checked="" type="radio"/>	2021/08/19	放射線科		腹部大動脈	PETCT装置 (委託)	作成中
<input type="radio"/>	2021/08/20	形成外科		足関節	PETCT装置 (委託)	作成中

CD-R画像受取票

医療画像連携担当: 内線 21162

依頼年月日 平成 25 年 12 月 6 日 (金)

登録ID 45110011 科 放射線科

患者氏名 サキ 太郎様

依頼科(受取科) 放射線科 依頼者氏名 橋本 医師

連絡先部署 内線: PHS

依頼事項

画像持出力 平成 年 月 日 ( )

医療画像連携担当 受取者氏名

※上記の業務事項を記入の上、共有サーバーに医療画像連携担当(受取)にてCD-Rを送付して下さい。

(2) 受取票印刷

- (1) 画面下部の「作成履歴」ボタンをクリック後、メディアの作成履歴が表示されます。
- (2) 印刷対象の履歴のラジオボタンをクリックします。
- (3) 「受取票印刷」ボタンをクリックして受取票を表示します。

## 4. 終了方法

Portable Viewer Creation System ログイン **テストユーザ1** ユーザ切替

医療画像情報メディア作成 (1) **閉じる**

患者ID 0003334489 富士 患者 フジ キンジャ 1972(S47).11.23 48歳 外来 4階中央病棟 6111号室 cm/kg 患者詳細

メディア作成情報

依頼科  依頼者  検査日  ~  モダリティ  検索 クリア

メディア作成日 2021/08/20

メディア作成区分  作成装置  検査種類 CD

コメント

<input type="checkbox"/> 選択	検査日	モダリティ	AccessionNo	検査種別	画像	備考
<input type="checkbox"/>	2021/02/08	CT	9820200801000000	一般		他院画像
<input type="checkbox"/>	2021/02/08	CT	9820200801000000	一般		

作成履歴 メディア作成 受取票印刷 画面クリア

(1)「閉じる」ボタンをクリックすることにより、システムを終了することができます。

## 改訂履歴

Rev.	発行日付	作成	審査	承認	変更内容	変更頁
1	2013.12.06	久保田	菊田	渡辺	新規作成	-
2	2021.08.20				バージョンアップによる修正	